

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。  
謹白

### 記

#### ■ 変更日

2023年7月10日（月）ご依頼分より

#### ■ 対象項目

項目コード	検査項目	備考
64849	タウ蛋白	測定委託先における試薬変更の為




## ● タウ蛋白

測定委託先における測定試薬の変更により以下の内容を変更いたします。

### ▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
案内書名称	変更はありません	タウ蛋白
項目コード	OR94 1	6484 9
検査方法	CLEIA	ELISA
基準値 (単位)	171~611 (pg/mL) 非プリオン病 (健常人含む)	1200 未満 (pg/mL)
保存 (安定性)	凍結 (29日)	凍結 (30日)
検体量 (mL)	髄液 2.5	髄液 1.0
容器	XR5 (L6) CSF 容器 Z50 (L5) コンテナ容器セット	XR4 (L4) 専用容器 Z50 (L5) コンテナ容器セット
備考欄	<b>重</b> 本検査は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断目的の検査です。他項目との重複依頼は避けてください。 <u>CSF 容器 (XR5)</u> に採取した検体は直ちに凍結し、コンテナ容器セット (Z50) に入れ、凍結保存してください。指定外の容器で提出された場合は、データ低下の恐れがありますので、必ず指定容器で提出してください。 &c	<b>重</b> 本検査は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断目的の検査です。他項目との重複依頼は避けてください。 <u>専用容器 (XR4)</u> に採取した検体は直ちに凍結し、コンテナ容器セット (Z50) に入れ、凍結保存してください。指定外の容器で提出された場合は、データ低下の恐れがありますので、必ず指定容器で提出してください。 &c
参考文献	1 測定法文献：湯原 麻子, 他：医学と薬学 79 (1) :91~97, 2022. 2 臨床意義文献：野島 久, 他：医学と薬学 79 (1) :99~105, 2022.	1 測定法文献：T. Nishimura, et al: Meth Find Exp Clin Pharmacol 20 (3):227~235, 1998. 2 臨床意義文献：Chohan G, et al: J Neurol Neurosurg Psychiatry 81 (11):1243~, 2010.
JLAC10	5C200-0000-041-052	5C200-0000-041-023

### ▼相関図

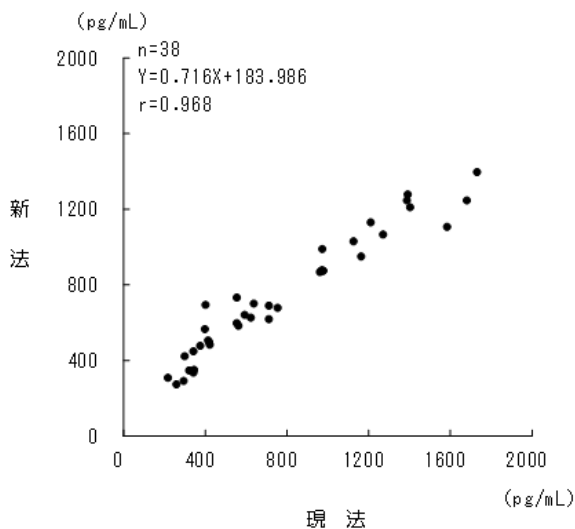

### ▼容器

新	現
XR5 旧容器記号 L6	XR4 旧容器記号 L4
	
CSF 容器 貯蔵方法：室温 有効期間：製造から3年	専用容器 貯蔵方法：室温 有効期間：製造から4年